







# HU-FRIEDY WATERLINE FILTER

## INSTALLATION WITH A-DEC 500 AND 300 BOTTLES

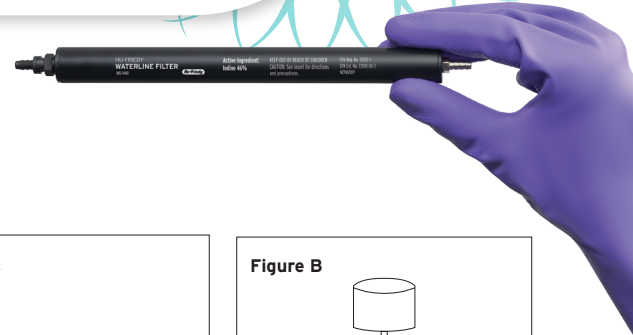

### DIRECTIONS

1. Remove A-dec bottle from the manifold.
2. Locate and remove two hex screws from collar with 1/8" allen wrench (Figure A).
3. Separate collar and lift the riser tube assembly from the bottle (Figure B).
4. Hold the Hu-Friedy Waterline Filter alongside the riser tube and mark the riser tube to allow for at least a 1/4" gap between the end of the Hu-Friedy Waterline Filter and the bottom of the bottle (Figure C).
5. Cut off the lower section of the riser tube at the mark using a tubing cutter, sharp knife or scissors (Figure C).
6. Push a tubing sleeve onto the riser tube, then push the hose barb attached to the Hu-Friedy Waterline Filter into the tubing, making sure that it is fully engaged (Figure D).
7. Slide the tubing sleeve down over the hose barb, and make sure that the barb fitting is firmly threaded into the Hu-Friedy Waterline Filter body.
8. Insert riser tube assembly with Hu-Friedy Waterline Filter into the bottle.
9. Aligning the notches inside the collar with the bottle and riser tube assembly, carefully reconnect the collar to the bottle (Figure E). Do not overtighten.
10. Return the A-dec bottle containing the Hu-Friedy Waterline Filter to the manifold

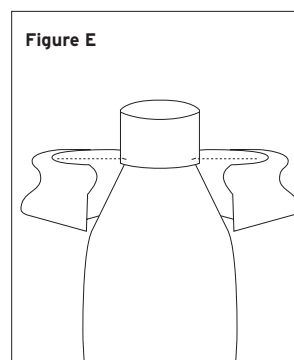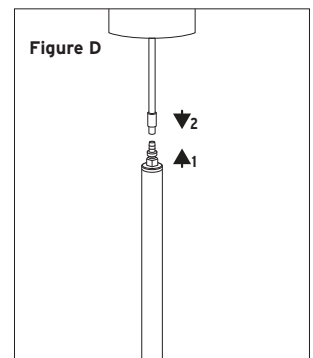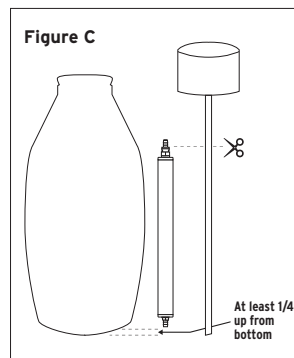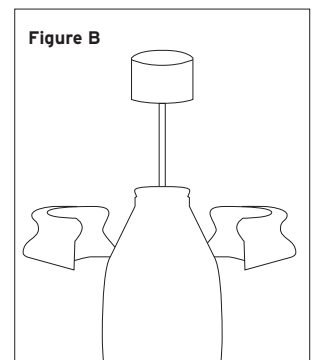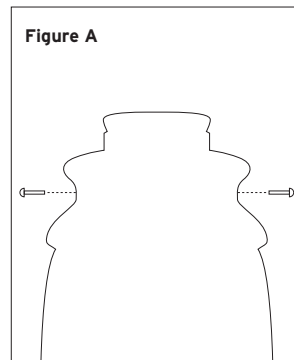

For more information, including an installation video, visit [www.Hu-Friedy.com/Dental-Waterline-Cleaner](http://www.Hu-Friedy.com/Dental-Waterline-Cleaner)

Call 1-800-Hu-Friedy or contact your authorized Hu-Friedy representative for more information.  
©2019 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. All rights reserved. [980] HFL-178/0219

How the best perform









# FILTRE DE CONDUITE D'EAU HU-FRIEDY

## INSTALLATION AVEC DES BOUTEILLES POUR A-DEC 500 ET 300

### INSTRUCTIONS

1. Retirer la bouteille A-dec du collecteur.
2. Trouver et retirer les deux vis à tête hexagonale du collier avec une clé hexagonale de 3,2 mm (1/8 po) (Figure A).
3. Séparer le collier et soulever le tube de dégagement de la bouteille (Figure B).
4. Tenir le filtre de conduite d'eau Hu-Friedy à côté du tube de dégagement et marquer ce dernier de manière à laisser un espace d'au moins 6 mm (1/4 po) entre l'extrémité du filtre de conduite d'eau Hu-Friedy et le fond de la bouteille (Figure C).
5. Couper la section inférieure du tube de dégagement à la marque supérieure en utilisant un coupe-tube, un couteau tranchant ou des ciseaux (Figure C).
6. Pousser un manchon de tube sur le tube de dégagement, puis enfoncer le raccord cannelé fixé au filtre de conduite d'eau Hu-Friedy dans le tube, en veillant à ce qu'il soit complètement enfoncé (Figure D).
7. Faire glisser le manchon de tube vers le bas sur le raccord cannelé, et s'assurer que le raccord cannelé est fermement vissé dans le corps du filtre de conduite d'eau Hu-Friedy.
8. Insérer le tube de dégagement avec le filtre de conduite d'eau Hu-Friedy dans la bouteille.
9. En alignant les encoches à l'intérieur du collier avec la bouteille et le tube de dégagement, reconnecter avec précaution le collier à la bouteille (Figure E). Ne pas serrer trop fort.
10. Remettre la bouteille A-dec contenant le filtre de conduite d'eau Hu-Friedy dans le collecteur.

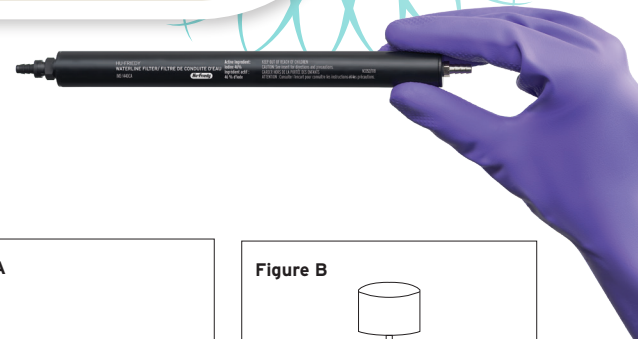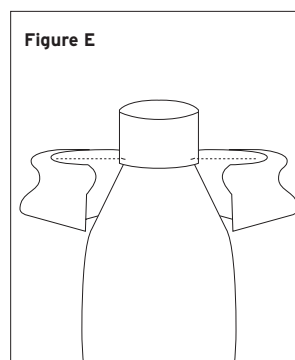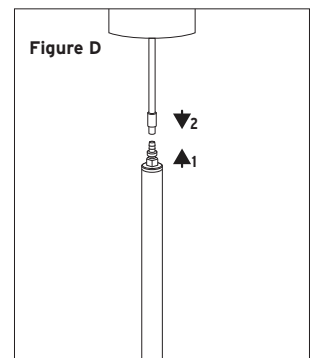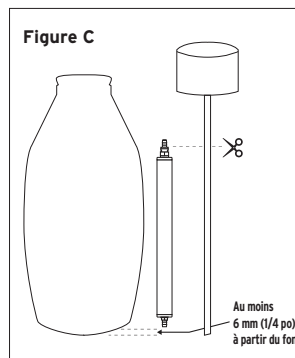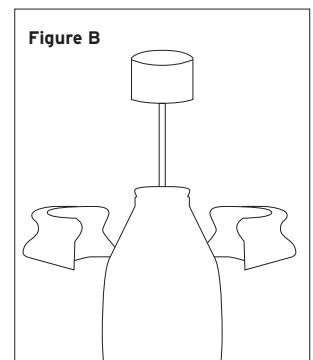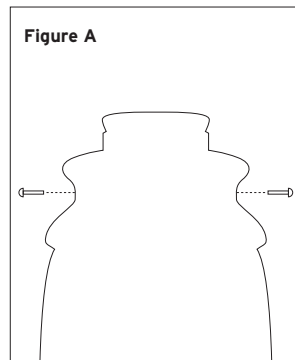

Pour plus de renseignements, y compris une vidéo d'installation, visitez [www.Hu-Friedy.com/Dental-Waterline-Cleaner](http://www.Hu-Friedy.com/Dental-Waterline-Cleaner)

Pour plus de renseignements, composez le 1-800-Hu-Friedy ou contactez votre représentant Hu-Friedy agréé.

©2019 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. Tous droits réservés. [980] HFL-178/0219

How the best perform

