

Pantone 306C
Pantone 1788C
Black

6.5"

3"



DANGER

Causes skin irritation. Causes serious eye damage. May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.

Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

All company and product names are trademarks of Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, its affiliates or related companies, unless otherwise noted. | Tous les noms de société et de produit sont des marques de commerce de Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, ses filiales ou ses sociétés apparentées, sauf mention contraire.

© 2026 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. All rights reserved. | Tous droits réservés.

UFI: 96EK-8WYE-TA0H-AXRM

K8504/0221

Enzymax Earth Pax™

Concentrated Ultrasonic Detergent & Presoak
Détergeant et Produit de Trempage
Concentré Ultrasonique

- **Fast acting dual enzyme cleaning**
Nettoyage à double enzyme à action rapide
- **Advanced Steelgard™ Corrosion Protection**
Protection avancée contre la corrosion Steelgard™
- **Mineral deposit elimination | Élimination des dépôts organiques**
- **Biodegradable dual enzyme cleaner**
Nettoyant biodégradable à double enzyme*

* Biodegradable formula according to the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) testing
Formule biodégradable conformément aux normes de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

IMS-1332
32 – 1/2 OZ. (14 GRAM) PACKETS
32 – 1/2 OZ (14 GRAMMES) SACHETS

BAR CODE FPO
+D67148102513

HuFriedyGroup
The Best In Practice

CANADA IMPORTER USE ONLY
RÉSERVÉ AUX IMPORTATEURS
CANADIENS

Hu-Friedy

Manufactured for:
Hu-Friedy Mfg. Co., LLC
2501 Sanders Rd.,
Northbrook, IL 60062 | USA
1-800-Hu-Friedy or 1-773-975-6100
Hu-Friedy.com

Europe: Zweigniederlassung Deutschland
Kleines Öschle 8 | D-78532 Tuttlingen
00800 48 37 4339
Hu-Friedy.eu

24-Hour Number | Numéro 24 heures :
1-800-535-5053


International : 1-352-323-3500

Made in USA | Fabriqué aux États-Unis

VENDOR USE ONLY

**PLEASE READ WARNING INFO
INSIDE.**

**VEUILLEZ NOTER LES DÉTAILS
D'AVIS SITUER À L'INTÉRIEUR.**

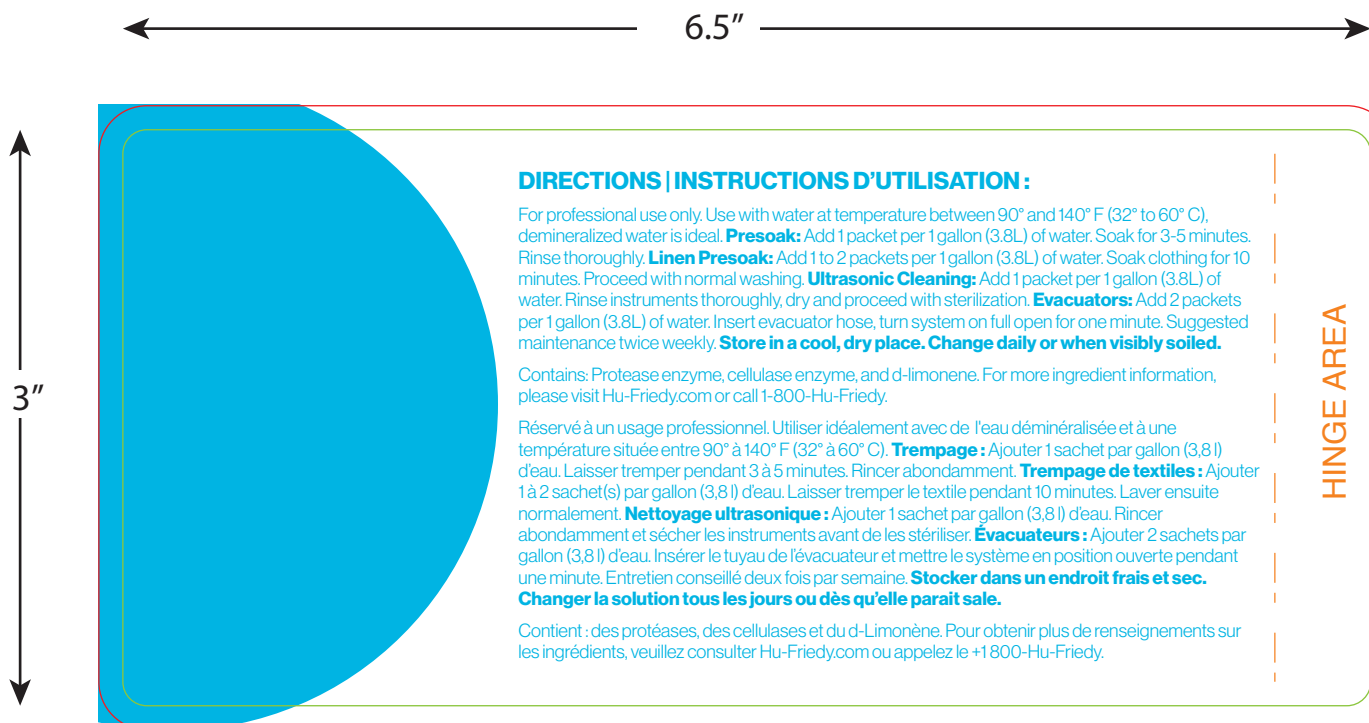

DIRECTIONS | INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

For professional use only. Use with water at temperature between 90° and 140° F (32° to 60° C), demineralized water is ideal. **Presoak:** Add 1 packet per 1 gallon (3.8L) of water. Soak for 3-5 minutes. Rinse thoroughly. **Linen Presoak:** Add 1 to 2 packets per 1 gallon (3.8L) of water. Soak clothing for 10 minutes. Proceed with normal washing. **Ultrasonic Cleaning:** Add 1 packet per 1 gallon (3.8L) of water. Rinse instruments thoroughly, dry and proceed with sterilization. **Evacuators:** Add 2 packets per 1 gallon (3.8L) of water. Insert evacuator hose, turn system on full open for one minute. Suggested maintenance twice weekly. **Store in a cool, dry place. Change daily or when visibly soiled.**

Contains: Protease enzyme, cellulase enzyme, and d-limonene. For more ingredient information, please visit Hu-Friedy.com or call 1-800-Hu-Friedy.

Réservé à un usage professionnel. Utiliser idéalement avec de l'eau déminéralisée et à une température située entre 90° à 140° F (32° à 60° C). **Trempage :** Ajouter 1 sachet par gallon (3,8 l) d'eau. Laisser tremper pendant 3 à 5 minutes. Rincer abondamment. **Trempage de textiles :** Ajouter 1 à 2 sachet(s) par gallon (3,8 l) d'eau. Laisser tremper le textile pendant 10 minutes. Laver ensuite normalement. **Nettoyage ultrasonique :** Ajouter 1 sachet par gallon (3,8 l) d'eau. Rincer abondamment et sécher les instruments avant de les stériliser. **Évacuateurs :** Ajouter 2 sachets par gallon (3,8 l) d'eau. Insérer le tuyau de l'évacuateur et mettre le système en position ouverte pendant une minute. Entretien conseillé deux fois par semaine. **Stocker dans un endroit frais et sec. Changer la solution tous les jours ou dès qu'elle paraît sale.**

Contient : des protéases, des cellulases et du d-Limonène. Pour obtenir plus de renseignements sur les ingrédients, veuillez consulter Hu-Friedy.com ou appelez le +1 800-Hu-Friedy.

6.5"

HINGE AREA

Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Wash hands, forearms and face thoroughly after handling. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. In case of inadequate ventilation wear respiratory protection. **If on skin:** Wash with plenty of water. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. **If inhaled:** Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER/doctor. **If in eyes:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER/doctor. Dispose of contents/container in accordance with local, regional, national and/or international regulations.

Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/un équipement de protection du visage. Lorsque la ventilation du local est insuffisante porter un équipement de protection respiratoire. **En cas de contact avec la peau:** Laver abondamment à l'eau. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. **En cas d'inhalation:** transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin. **En cas de contact avec les yeux:** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/médecin. Éliminer le contenu/le récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.