

Pantone 326C
Pantone 1945C
Pantone 425C
Black

6.5"

3"



DANGER

Causes skin irritation. Causes serious eye damage. May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.

Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.



+D6713878431G

ENZYMAX[®] POWDER | POUDRE

Concentrated Ultrasonic Detergent & Presoak
Détergeant et Produit de Trempage
Concentré Ultrasonique

- Fast acting dual enzyme cleaning
Nettoyage à double enzyme à action rapide
- Advanced Steelgard[™] corrosion protection
Protection avancée contre la corrosion Steelgard[™]
- Mineral deposit elimination
Élimination des dépôts organiques

IMS-1230
1.76 LBS (800 GRAMS)
1,76 LB (800 GRAMMES)

Hu-Friedy

CANADA IMPORTER USE ONLY
RÉSERVÉ AUX IMPORTATEURS CANADIENS

SDS available on request or at Hu-Friedy.com.
FS disponible sur demande ou sur Hu-Friedy.com.

Manufactured for | Fabriqué pour :
Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

2501 Sanders Rd., Northbrook, IL 60062 | USA
Telephone | Téléphone : 1-800-Hu-Friedy or
1-773-975-6100

Website | Site web : Hu-Friedy.com

Europe: Zweigniederlassung Deutschland
Kleines Öschle 8, D-78532 Tuttlingen

Telephone | Téléphone : 00800 48 37 4339

Website | Site web : Hu-Friedy.eu

24-Hour Number | Numéro 24 heures/24 :
1-800-535-5053

International : 1-352-323-3500

C6867/0217

VENDOR USE ONLY

Made in USA
Fabriqué aux États-Unis

PLEASE READ WARNING INFO INSIDE.
VEUILLEZ NOTER LES DÉTAILS
D'AVIS SITUER À L'INTÉRIEUR.


6.5"

3"

DIRECTIONS | INSTRUCTIONS D'UTILISATION

For professional use only. Use with water at temperature between 90° and 140° F (32° to 60° C), demineralized water is ideal. **Presoak:** Add 1 scoop per 1 gallon (3.8L) of water. Soak for 3-5 minutes. Rinse thoroughly. **Linen Presoak:** Add 1 to 2 scoops per 1 gallon of water (3.8L). **Ultrasonic Cleaning:** Add 1 scoop per 1 gallon (3.8L) of water. Rinse instruments thoroughly, dry and proceed with sterilization. **Evacuators:** Add 2 scoops per 1 gallon (3.8L) of water. Insert evacuator hose, turn system on full open for one minute. Suggested maintenance twice weekly. **Store in a cool, dry place. Change solution daily or when visibly soiled.**

Réservé à un usage professionnel. Utiliser idéalement avec de l'eau déminéralisée et à une température comprise entre 90° et 140° F (32° et 60° C). **Prétrempage :** Ajouter 1 cuillère par gallon (3,8 l) d'eau. Laisser tremper pendant 3 à 5 minutes. Rincer abondamment. **Prétrempage du linge :** Ajouter 1 à 2 cuillères par gallon (3,8 l) d'eau. **Nettoyage ultrasonique :** Ajouter 1 cuillère par gallon (3,8 l) d'eau. Rincer abondamment et sécher les instruments avant de les stériliser. **Évacuateurs :** Ajouter 2 cuillères par gallon (3,8 l) d'eau. Insérer le tuyau de l'évacuateur et mettre le système en position complètement ouverte pendant une minute. Entretien conseillé deux fois par semaine. **Stocker dans un endroit frais et sec. Changer la solution tous les jours ou dès qu'elle paraît sale.**

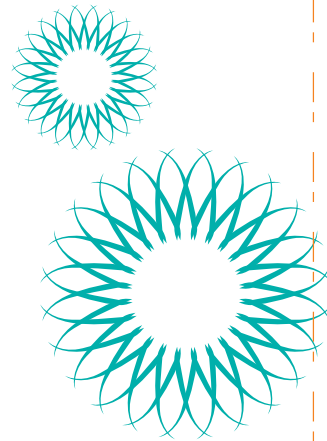

HINGE AREA

6.5"

HINGE AREA

Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Wash hands, forearms and face thoroughly after handling. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. In case of inadequate ventilation wear respiratory protection. **IF ON SKIN:** Wash with plenty of water. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. **IF INHALED:** Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER/doctor. **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER/doctor. Dispose of contents/container in accordance with local, regional, national and/or international regulations.

Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/un équipement de protection du visage. Lorsque la ventilation du local est insuffisante porter un équipement de protection respiratoire. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:** Laver abondamment à l'eau. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. **EN CAS D'INHALATION:** transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/médecin. Éliminer le contenu/le récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

3"