

EfferZyme™ bruistabletten voor ultrasone reiniging

REF JET

GEBRUIKSAANWIJZING

NL

GEBRUIKSAANWIJZING:

Voor algemene ultrasone reiniging, voorweken van instrumenten en reiniging van afvoersystemen. TWEE TABLETTEN IS VOLDOENDE VOOR 4 LITER. Voeg twee tabletten toe aan 4 liter warm kraanwater. Gebruik voor maximaal 2 liter één tablet. Niet mengen met andere reinigings- of desinfectiemiddelen. Draag oogbescherming en rubberen handschoenen tijdens het hanteren.

VOOR ULTRASONE REINIGERS:

Afhankelijk van de grootte van de ultrasone eenheid, laat u één of twee tabletten direct in de tank vallen. Vul met warm kraanwater. De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 60 °C (140 °F). Als u het mengsel vooraf mengt voor later gebruik, voegt u twee tabletten toe aan een bak van 4 liter en vult u deze met warm kraanwater. Bewaar de gemengde oplossing in een afgedekte bak tot deze wordt gebruikt. Reinig de onderdelen ten minste 10 minuten ultrasoon. Langere tijd in de oplossing kan roestvorming veroorzaken op sommige soorten staal of carbiden. Spoel de onderdelen grondig af. Droog de instrumenten voordat u verdergaat met het sterilisatieproces. Vervang de oplossing als deze zichtbaar troebel wordt of minimaal eenmaal per dag, zoals aanbevolen in de "ADA Recommendations for Dental Office Procedures" (Aanbevelingen voor procedures in de tandheelkundige praktijk van de Amerikaanse vereniging voor tandartsen).

VOOR HET VOORWEKEN VAN INSTRUMENTEN:

Bereid de oplossing zoals hierboven vermeld in de gebruiksaanwijzing. Week de instrumenten gedurende minimaal 10 minuten in de oplossing, langer bij hardnekkige vlekken. De temperatuur mag niet hoger zijn dan 60 °C (140 °F). Laat instrumenten niet langer dan 24 uur in de oplossing weken.

VOOR AFVOERSYSTEMEN:


Bereid de oplossing zoals hierboven vermeld in de gebruiksaanwijzing. Laat aan het eind van elke dag ten minste 1 liter oplossing door elke aanzuigopening lopen en laat het systeem een paar minuten draaien, zoals aanbevolen door de fabrikant. Spoel de lijnen meerdere keren per dag door als er zware chirurgische ingrepen worden uitgevoerd.

De gebruikelijke pH van de oplossing is 7,0 tot 8,0. Raadpleeg de instructies van de fabrikant van de tandheelkundige instrumenten voor de juiste reinigingsprocedures.

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN

NIET VOOR INNAME

KOEL EN DROOG BEWAREN

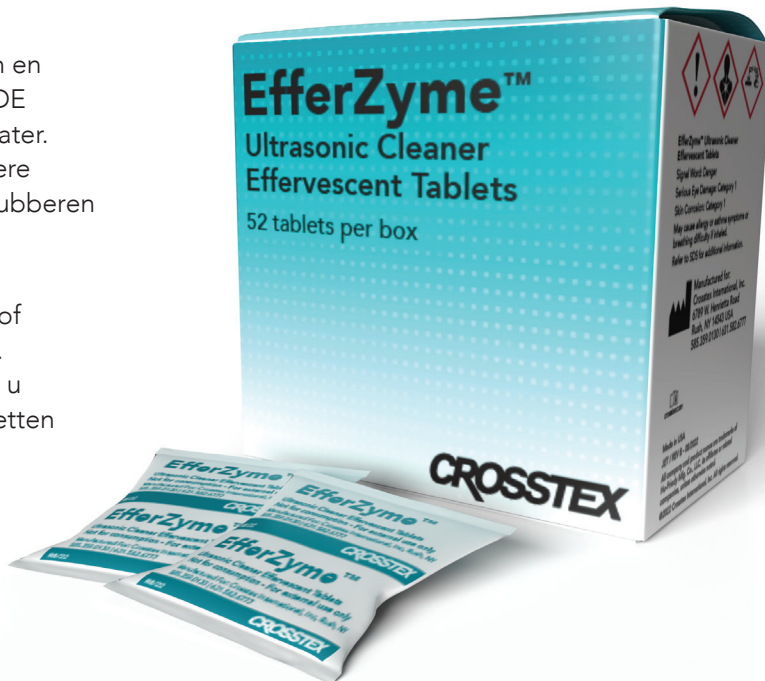

Vervaardigd voor: Crosstex International, Inc.
6789 W. Henrietta Road, Rush, NY 14543 VS
585.359.0130 | 631.582.6777 | crosstex.com

Vervaardigd in de VS
JET-IFU-NL / REV B - 08/2022

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, gelieerde ondernemingen of gerelateerde ondernemingen, tenzij anders vermeld.
©2026 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. Alle rechten voorbehouden.



CROSSTEX