

Signature Series™ Racks



REF IMS-1433 / IMS-1434

INSTRUCTIONS FOR USE

PARTS LIST:

- ① End Piece with handles (2 of each) ② Side Piece (2 of each) ③ Black Fasteners (4 of each)


ASSEMBLY

STEP 1




Slide inside of frame

STEP 2

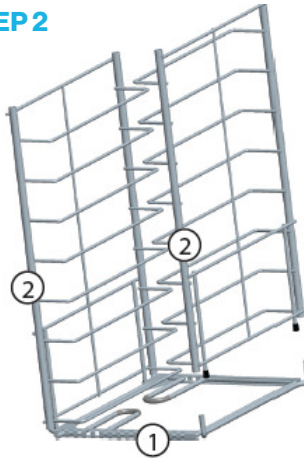


STEP 3

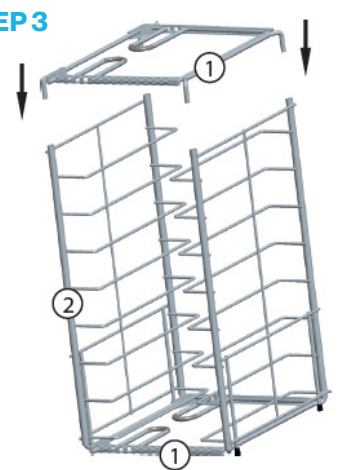


ASSEMBLY OF BLACK FASTENERS

Attach black fasteners to connect the side panels to the end panels. Repeat steps 4 and 5 for both sides of the rack.

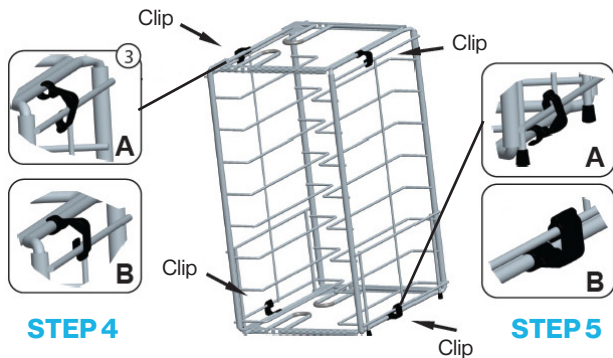

ADJUSTING RACKS

Lay the rack on its side with the handles facing you. Steady the rack in one hand and adjust with the other.

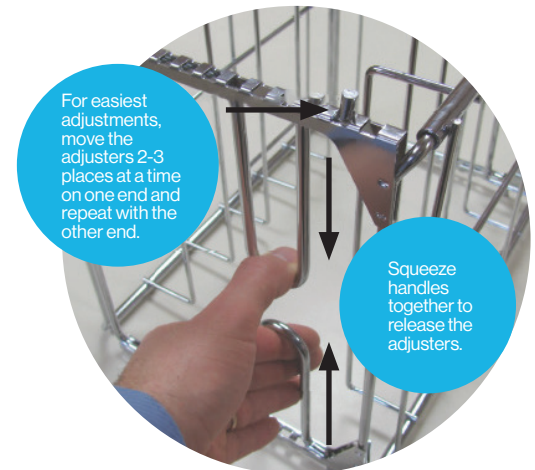

ADJUSTMENTS



Signature Series™ Cassettes Width

Signature Series™ Tubs - Width

IMS-1433	Adjustable 3 Tub Rack	Holds 3 Signature Series™ Tubs or up to 6 Signature Series™ Cassettes	Size: Min 9 3/4" – Max 16 3/4"w x 11"d x 13 1/2"h
IMS-1434	Adjustable 4 Tub Rack	Holds 4 Signature Series™ Tubs or up to 8 Signature Series™ Cassettes	Size: Min 9 3/4" – Max 16 3/4"w x 11"d x 18"h



Hu-Friedy Mfg. Co., LLC
2501 Sanders Rd.
Northbrook, IL 60062 | USA
1-800-Hu-Friedy | HuFriedyGroup.com



Hu-Friedy Europe LLC & Co. KG
Bogenstrasse 6 - 8
78576 Emmingen - Liptingen
Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau
Switzerland



MDSS-UK RPLtd.
Parkway House, Palatine Rd,
Northenden, Wythenshawe,
Manchester M22 4DB
United Kingdom



M4900 / REV 4 - 2607

In case of any serious incident that has occurred and involves our devices within the European Union, please report it to Hu-Friedy Mfg. Co., LLC and your national competent authority of the member state.

All company and product names are trademarks of Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, its affiliates or related companies, unless otherwise noted.

©2026 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. All rights reserved.

HuFriedyGroup
The Best In Practice

Signature Series™ Racks



REF IMS-1433 / IMS-1434


GEBRAUCHSANWEISUNG

TEILELISTE:

- ① Endstück mit Griffen (je 2) ② Seitenteil (je 2) ③ Schwarze Befestigungsteile (je 4)


ZUSAMMENBAU

SCHRITT 1

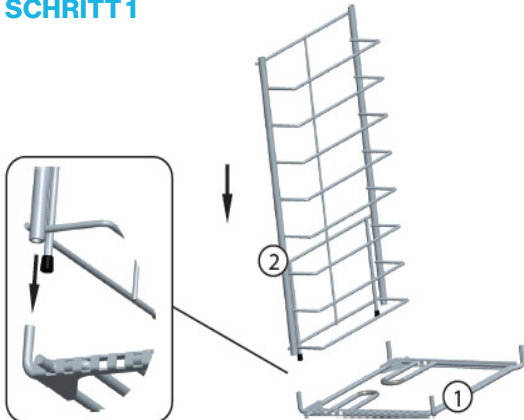


In den Rahmen einschieben

SCHRITT 2

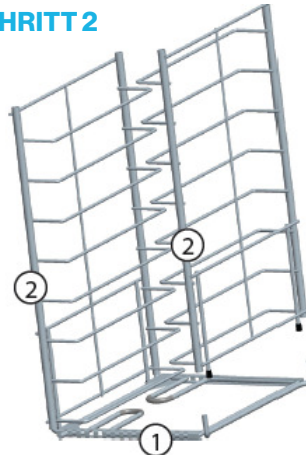


SCHRITT 3

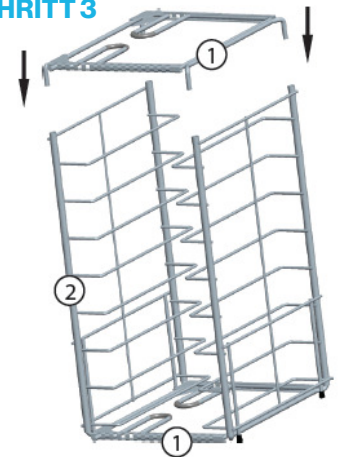

ANBRINGEN DER SCHWARZEN BEFESTIGUNGSTEILE

Die schwarzen Befestigungsteile anbringen, um die Seitenteile an den Endstücken zu befestigen. Schritte 4 und 5 an beiden Seiten des Regals wiederholen.

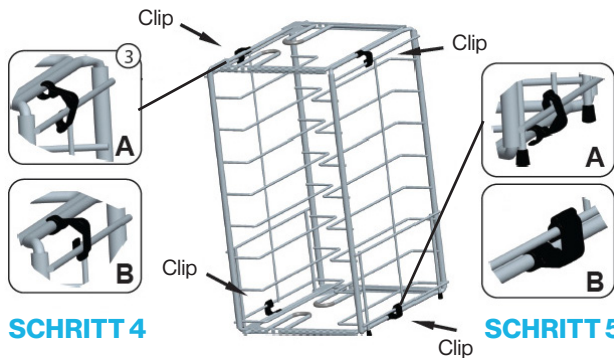

SCHRITT 4

SCHRITT 5

REGALE EINSTELLEN

Das Regal mit den Griffen auf Sie hin ausgerichtet auf die Seite legen. Das Regal mit einer Hand festhalten und mit der anderen Hand einstellen.



Die Einsteller an einem Ende um jeweils 2-3 Positionen verstellen und dann diesen Vorgang am anderen Ende wiederholen, um das Einstellen zu erleichtern.

Die Griffe zusammendrücken, um die Einsteller freizugeben.

EINSTELLUNGEN



Signature Series™ Kassetten – Breite

Signature Series™ Tubs – Breite

IMS-1433	Verstellbares Regal für 3 Kunststoffschalen	Für die Lagerung von 3 Signature Series™ Tubs oder bis zu 6 Signature Series™ Kassetten	Größe: Min. 9 3/4" – max. 16 3/4" x 11" x 13 1/2" (248 mm x 425 mm x 343 mm) (B x T x H)
IMS-1434	Verstellbares Regal für 4 Kunststoffschalen	Für die Lagerung von 4 Signature Series™ Tubs oder bis zu 8 Signature Series™ Kassetten	Größe: Min. 9 3/4" – max. 16 3/4" x 11" x 18" (248 mm x 425 mm x 457 mm) (B x T x H)



Hu-Friedy Mfg. Co., LLC
2501 Sanders Rd.
Northbrook, IL 60062 | USA
1-800-Hu-Friedy | HuFriedyGroup.com



Hu-Friedy Europe LLC & Co. KG
Bogenstrasse 6-8
78576 Emmingen - Liptingen
Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau
Switzerland



MDSS-UK RPLtd.
Parkway House, Palatine Rd.
Northenden, Wythenshawe,
Manchester M22 4DB
United Kingdom



M4900 / REV 4 - 2607

Bitte melden Sie schwerwiegende Vorkommnisse im Zusammenhang mit unseren Produkten in der Europäischen Union Hu-Friedy Mfg. Co., LLC und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem Sie ansässig sind. Alle Firmen- und Produktnamen sind Marken von Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, ihren Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen, sofern nicht anderweitig angegeben.
©2026 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. Alle Rechte vorbehalten.

HuFriedyGroup
The Best In Practice

Signature Series™ Racks



REF IMS-1433 / IMS-1434

INSTRUCCIONES DE USO

LISTADO DE PIEZAS:


① Pieza terminal con mangos (2 de cada una)

② Pieza lateral (2 de cada una)

③ Piezas de sujeción negras (4 de cada una)


MONTAJE

PASO 1

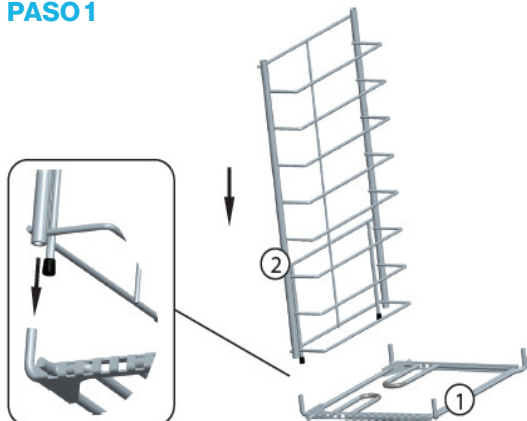


Deslice dentro de la estructura

PASO 2

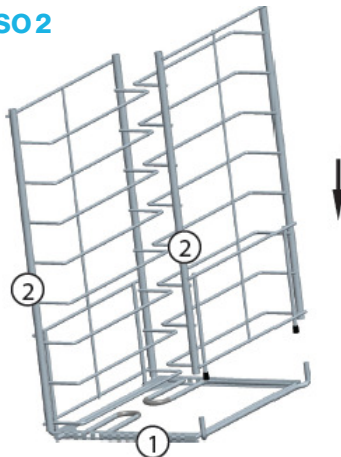


PASO 3

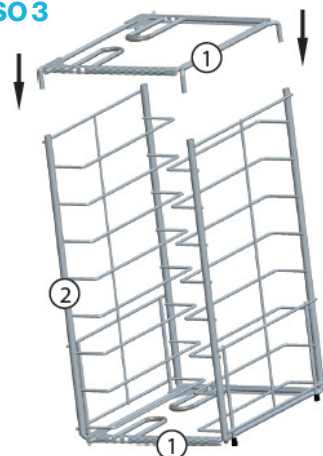

MONTAJE DE LAS PIEZAS DE SUJECIÓN NEGRAS

Coloque las piezas de sujeción negras para conectar los paneles laterales a los paneles terminales. Repita los pasos 4 y 5 para ambos lados del estante.

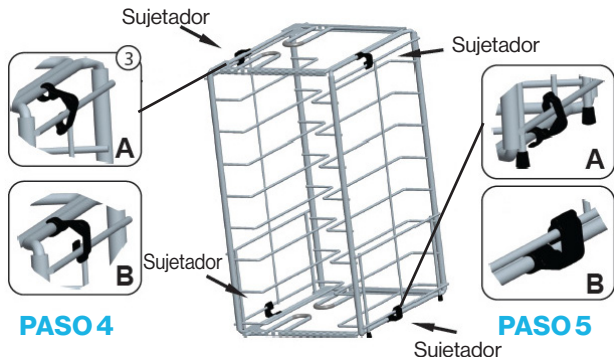


PASO 4

PASO 5

AJUSTE DE LOS ESTANTES

Coloque el estante sobre uno de sus lados con los mangos hacia usted. Sujete el estante con una mano y ajuste con la otra.

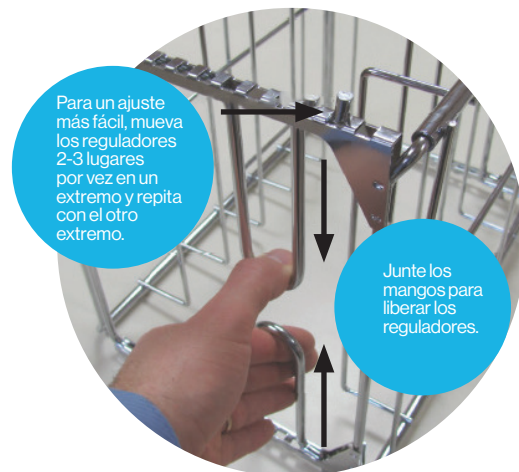

AJUSTES



Ancho de los Signature Series™ Cassettes

Ancho de los Signature Series™ Tubs

IMS-1433	Estante ajustable para 3 tubos	Capacidad para 3 Signature Series Tubs o hasta 6 Signature Series™ Cassettes	Tamaño: mín. 9 3/4" (248 mm) – máx. 16 3/4" (425 mm) de ancho x 11" (280 mm) de diámetro x 13 1/2" (343 mm) de alto
IMS-1434	Estante ajustable para 4 tubos	Capacidad para 4 Signature Series Tubs o hasta 8 Signature Series™ Cassettes	Tamaño: mín. 9 3/4" (248 mm) – máx. 16 3/4" (425 mm) de ancho x 11" (280 mm) de diámetro x 18" (457 mm) de alto



Hu-Friedy Mfg. Co., LLC
2501 Sanders Rd.
Northbrook, IL 60062 | USA
1-800-Hu-Friedy | HuFriedyGroup.com



Hu-Friedy Europe LLC & Co. KG
Bogenstrasse 6 - 8
78576 Emmingen - Liptingen
Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau
Switzerland



MDSS-UK RPLtd.
Parkway House, Palatine Rd.
Northenden, Wythenshawe,
Manchester M22 4DB
United Kingdom



M4900 / REV 4 - 2607

En el caso de que se produzca un incidente grave con nuestros dispositivos en algún país de la Unión Europea, notifique la incidencia sin dilación a Hu-Friedy Mfg. Co., LLC y al organismo nacional pertinente del Estado miembro.

Todos los nombres de productos son marcas comerciales de Hu-Friedy Mfg. Co., LLC., sus filiales o empresas relacionadas, a menos que se indique lo contrario.

©2026 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. Todos los derechos reservados.

HuFriedyGroup
The Best In Practice

Signature Series™ Racks



REF IMS-1433 / IMS-1434

MODE D'EMPLOI

LISTE DES PIÈCES:


① Embout d'extrémité avec poignées (2 de chaque)

② Embout latéral (2 de chaque)

③ Attaches noires (4 de chaque)


ASSEMBLAGE

ÉTAPE 1

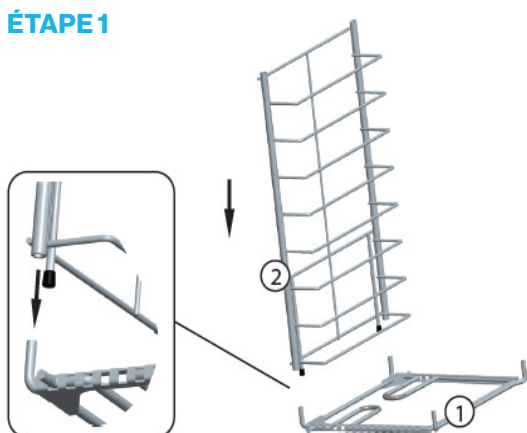


Glisser à l'intérieur du cadre

ÉTAPE 2

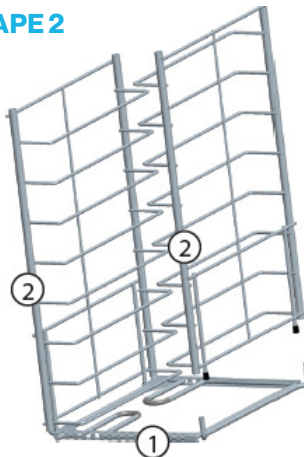


ÉTAPE 3

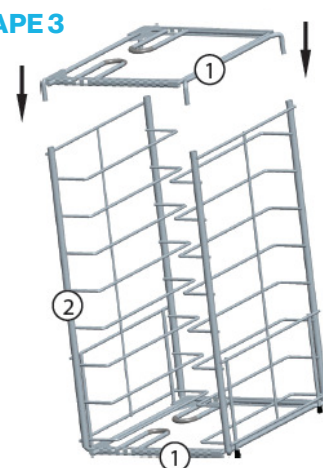


ASSEMBLAGE DES ATTACHES NOIRES

Fixer les attaches noires de sorte à raccorder les panneaux latéraux aux panneaux d'extrémité. Répéter les étapes 4 et 5 des deux côtés du support.

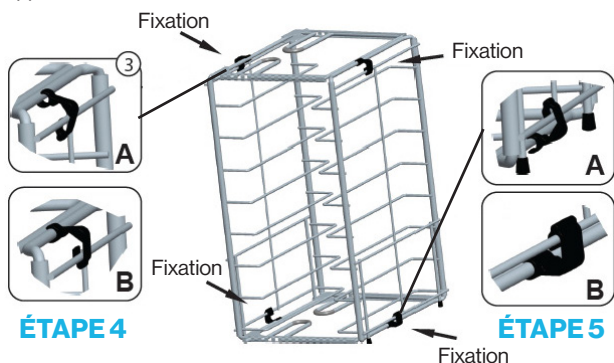

RÉGLAGE DES SUPPORTS

Placer le support sur le côté, les poignées face à soi. Maintenir le support d'une main et procéder au réglage de l'autre.

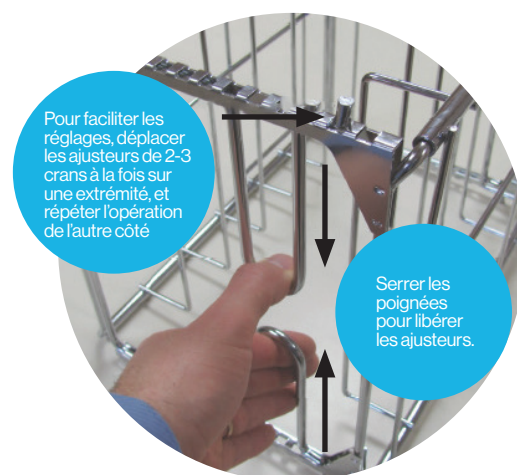

Pour faciliter les réglages, déplacer les ajusteurs de 2-3 crans à la fois sur une extrémité, et répéter l'opération de l'autre côté

Serrer les poignées pour libérer les ajusteurs.

RÉGLAGES



Largeur des cassettes Signature Series™

Largeur des tubs Signature Series™

IMS-1433	Support réglable pour 3 Tubs	Peut accommoder 3 Tubs Signature Series™ ou jusqu'à 6 cassettes Signature Series™	Dimensions : 9 3/4" à 16 3/4" (248 à 425 mm) (l) x 11" (280 mm) (p) x 13 1/2" (343 mm) (h)
IMS-1434	Support réglable pour 4 Tubs	Peut accommoder 4 Tubs Signature Series™ ou jusqu'à 8 cassettes Signature Series™	Dimensions : 9 3/4" à 16 3/4" (248 à 425 mm) (l) x 11" (280 mm) (p) x 18" (457 mm) (h)



Hu-Friedy Mfg. Co., LLC
2501 Sanders Rd.
Northbrook, IL 60062 | USA
1-800-Hu-Friedy | HuFriedyGroup.com

EU REP Hu-Friedy Europe LLC & Co. KG
Bogenstrasse 6 - 8
78576 Emmingen - Liptingen
Germany

CH REP MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau
Switzerland

UK REP MDSS-UK RPLtd.
Parkway House, Palatine Rd.
Northenden, Wythenshawe,
Manchester M22 4DB
United Kingdom



M4900 / REV 4 - 2607

En cas d'accident grave impliquant nos dispositifs au sein de l'Union Européenne, veuillez en informer Hu-Friedy Mfg. Co., LLC et votre autorité nationale compétente de l'état membre.
Sauf indication contraire, tous les noms de produits sont des marques de Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, de ses filiales ou sociétés associées.
©2026 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. Tous droits réservés.

HuFriedyGroup
The Best In Practice

Signature Series™ Racks

IT

REF IMS-1433 / IMS-1434


ISTRUZIONI PER L'USO

ELENCO PEZZI:

- ① Pezzo terminale con maniglie (2 di ognuno) ② Pezzo laterale (2 di ognuno) ③ Dispositivi di fissaggio neri (4 di ognuno)


MONTAGGIO

FASE 1

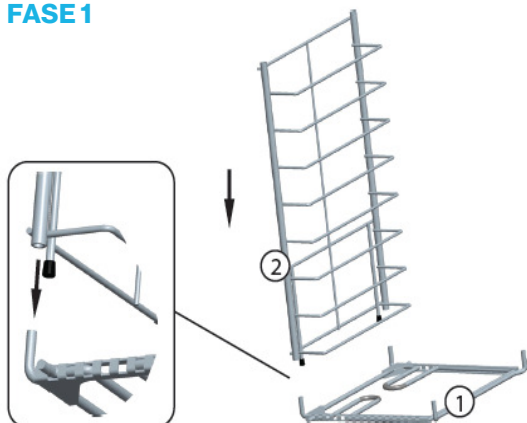


Far scorrere dentro il telaio

FASE 2

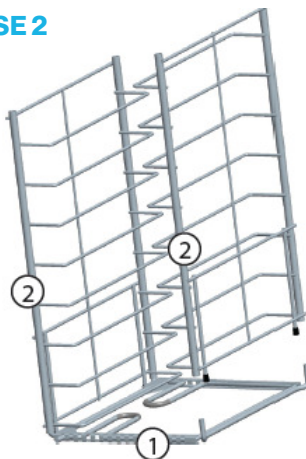


FASE 3

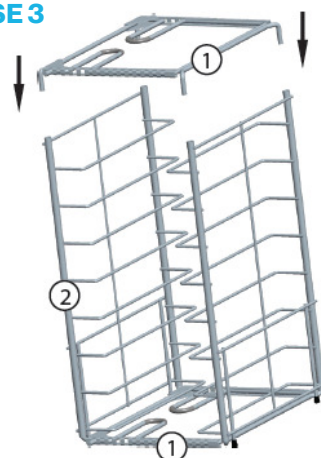

MONTAGGIO DEI DISPOSITIVI DI FISSAGGIO NERI

Collegare i dispositivi di fissaggio neri per unire i pannelli laterali a quelli terminali. Ripetere le fasi 4 e 5 per entrambi i lati del rack.

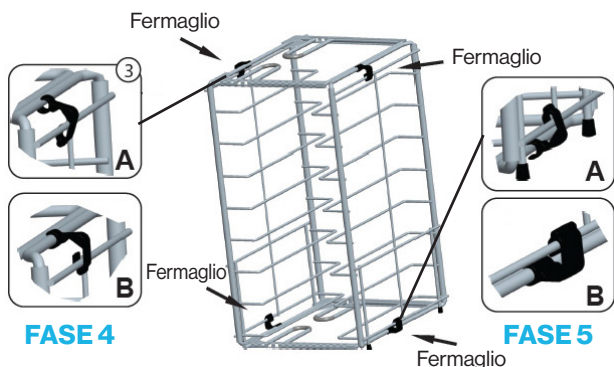

REGOLAZIONE DEI RACK

Disporre il rack sul lato con le maniglie rivolte verso l'utilizzatore. Tenerlo fermo con una mano e regolarlo con l'altra.

Per agevolare le regolazioni, spostare i regolatori di 2-3 posizioni alla volta a un'estremità e ripetere all'altra estremità.

Stringere le maniglie insieme per rilasciare i regolatori.

REGOLAZIONI



Larghezza delle cassette Signature Series™

Larghezza delle Signature Series™ Tub

IMS-1433	Rack a 3 tub regolabile	Contiene 3 Signature Series™ Tub o fino a 6 cassette Signature Series™	Dimensioni: Min 9 3/4" (248 mm) – Max 16 3/4" (425 mm) L x 11" (280 mm) P x 13 1/2" (343 mm) A
IMS-1434	Rack a 4 tub regolabile	Contiene 4 Signature Series™ Tub o fino a 8 cassette Signature Series™	Dimensioni: Min 9 3/4" (248 mm) – Max 16 3/4" (425 mm) L x 11" (280 mm) P x 18" (457 mm) A

Hu-Friedy

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC
2501 Sanders Rd.
Northbrook, IL 60062 | USA
1-800-Hu-Friedy | HuFriedyGroup.com



Hu-Friedy Europe LLC & Co. KG
Bogenstrasse 6 - 8
78576 Emmingen - Liptingen
Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau
Switzerland

MDSS-UK RPLtd.
Parkway House, Palatine Rd,
Northenden, Wythenshawe,
Manchester M22 4DB
United Kingdom



M4900 / REV 4 - 2607

In caso di incidente grave correlato ai nostri dispositivi all'interno dell'Unione Europea, effettuare la segnalazione a Hu-Friedy Mfg. Co., LLC e all'autorità nazionale competente dello Stato membro.
Tutti i nomi di società e dei prodotti sono marchi di fabbrica di Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, delle sue affiliate o di società collegate, se non diversamente indicato.
©2026 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. Tutti i diritti riservati.

HuFriedyGroup
The Best In Practice

Signature Series™ Racks



REF IMS-1433 / IMS-1434


INSTRUÇÃO DE USO

LISTA DE PEÇAS:

- ① Peça Final com pegas (2 de cada) ② Peça Lateral (2 de cada) ③ Fixadores Pretos (4 de cada)


MONTAGEM

PASSO 1

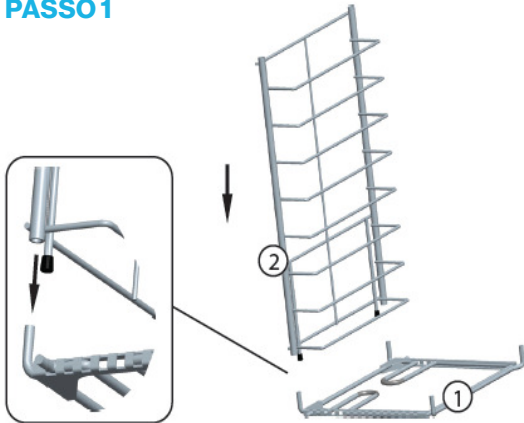


Deslize para dentro da estrutura

PASSO 2

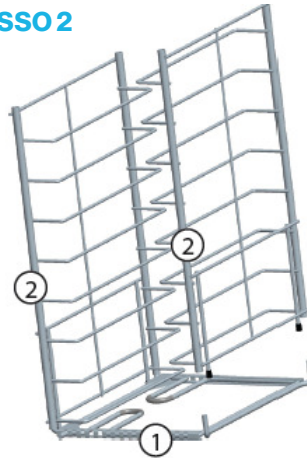


PASSO 3

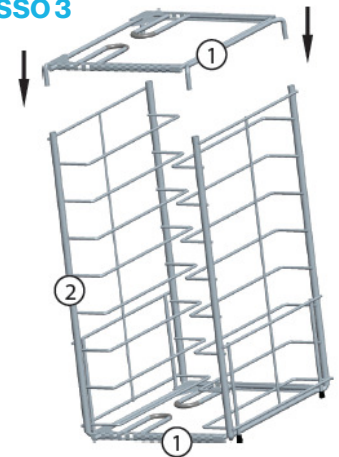

MONTAGEM DOS FIXADORES PRETOS

Prenda os fixadores pretos para ligar os painéis laterais aos painéis finais. Repita os passos 4 e 5 para ambos os lados do suporte.

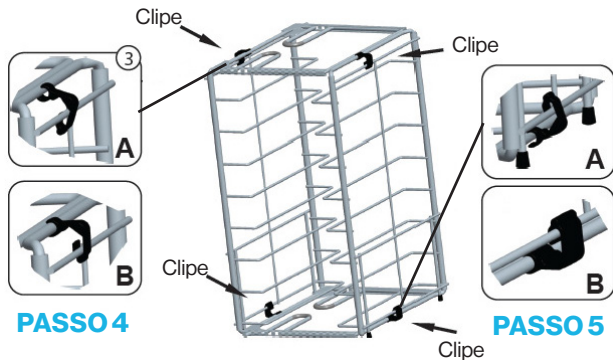


AJUSTAR OS SUPORTES

Coloque o suporte de lado com as pegas viradas para si. Estabilize o suporte numa mão e ajuste com a outra.

Para ajustes mais fáceis, mova os ajustadores 2-3 lugares de cada vez numa extremidade e repita com a outra extremidade.

Aperte as pegas juntas para libertar os ajustadores.

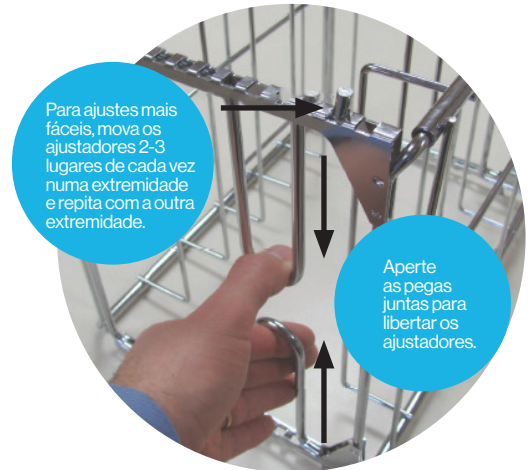

AJUSTES



Largura das Signature Series™ Cassettes

Largura das Signature Series™ Tubs

IMS-1433	Suporte Ajustável para 3 Tinas	Suporta 3 Signature Series™ Tubs ou até 6 Signature Series™ Cassettes	Tamanho: Min. 9 3/4" (248 mm) – Máx. 16 3/4" (425 mm) x 11"p (280 mm) x 13 1/2" a (343 mm)
IMS-1434	Suporte Ajustável para 4 Tinas	Suporta 4 Signature Series™ Tubs ou até 8 Signature Series™ Cassettes	Tamanho: Min. 9 3/4" (248 mm) – Máx. 16 3/4" (425 mm) x 11"p (280 mm) x 18" a (457 mm)



Hu-Friedy Mfg. Co., LLC
2501 Sanders Rd.
Northbrook, IL 60062 | USA
1-800-Hu-Friedy | HuFriedyGroup.com



Hu-Friedy Europe LLC & Co. KG
Bogenstrasse 6-8
78576 Emmingen - Liptingen
Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau
Switzerland



MDSS-UK RPLtd.
Parkway House, Palatine Rd,
Northenden, Wythenshawe,
Manchester M22 4DB
United Kingdom



M4900 / REV 4 - 2607

Em caso de qualquer incidente grave que tenha ocorrido e que envolva os nossos dispositivos na União Europeia, informe a Hu-Friedy Mfg. Co., LLC e a respetiva autoridade nacional competente do Estado-Membro. Todos os nomes de produtos são marcas comerciais da Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, das suas afiliadas ou empresas relacionadas, salvo indicação em contrário.
©2026 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. Todos os direitos reservados.

HuFriedyGroup
The Best In Practice