

HVE Mirror Connect

High Volume Evacuation

REF HVEMC

INSTRUCTIONS FOR USE


The HVE Mirror Connect is a single use item intended for connection with a suction system for use during dental procedures to remove blood, saliva, bone, tissue, and dental products as well as provide cheek retraction. The HVE Mirror Connect is designed to integrate only with a HuFriedyGroup doublesided #5 mirror head.

Warning:

- HVE Mirror Connect is a single-use product and is not intended to be autoclaved.
- Autoclave the Mirror Head component separately after every use. Refer to the instructions for use provided for mirror head(s), such as the HuFriedyGroup Instrument Reprocessing Guide for HuFriedyGroup Mirror Heads.
- Will not work with simple stem mirror head.

HVE Mirror Connect Instructions for use:

1. Insert HVE Mirror Connect into your HVE valve.
2. Using embossed guidelines on the HVE, slide HuFriedyGroup #5 Doublesided Mirror Head into HVE Mirror Connect fully until Mirror Head locks into place to match orientation.

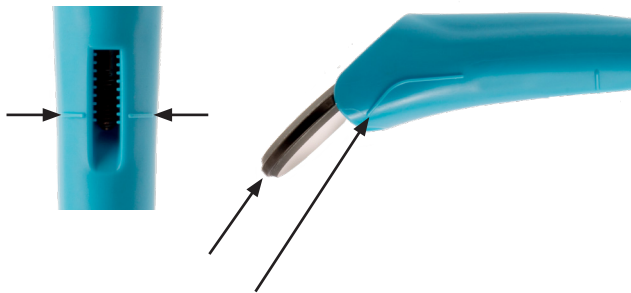

3. Use HVE Mirror Connect on patient during procedure.
4. After procedure is completed, remove Mirror Head from HVE Mirror Connect.
5. Dispose of HVE Mirror Connect.

Note: The HVE Mirror Connect includes embossed guidelines on the HVE to aid Mirror Head insertion. Two curved guidelines on the HVE sides designate the orientation of the Mirror Head, and one straight guideline on the shaft indicates the appropriate depth of Mirror Head insertion.

HuFriedyGroup #5 Mouth Mirrors	
MIR5DSHDB	#5 HD Black Line Double-Sided Mirror
MIR5DSHD	#5 HD Double-Sided Mirror
MIR5DS	#5 Rhodium Double-Sided Mirror



Hu-Friedy Mfg. Co., LLC
 3232 N. Rockwell Street | Chicago, IL 60618 | USA
 1-800-Hu-Friedy | info@hu-friedy.com



HFL-738 / REV B - 10/2023

All company and product names are trademarks of Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, its affiliates or related companies, unless otherwise noted.
 ©2023 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. All rights reserved.



Connecteur HVE pour miroir

Évacuation à volume élevé

REF HVEMC

MODE D'EMPLOI


Le connecteur HVE pour miroir est un dispositif à usage unique destiné à être connecté à un système d'aspiration lors d'interventions dentaires pour éliminer le sang, la salive, les os, les tissus et les produits dentaires, ainsi que pour reculer la joue. Le connecteur HVE pour miroir est conçu pour s'intégrer uniquement à une tête de miroir double face n° 5 HuFriedyGroup.

Avertissement :

- Le connecteur HVE pour miroir est un produit à usage unique qui n'est pas destiné à être autoclavé.
- Autoclavez séparément le composant de la tête de miroir après chaque utilisation. Consultez le mode d'emploi fourni pour la ou les têtes de miroir tel que le Guide de retraitement des instruments HuFriedyGroup pour têtes de miroir HuFriedyGroup.
- Ne fonctionne pas avec une tête de miroir à tige unique.

Mode d'emploi du connecteur HVE pour miroir :

1. Insérez le connecteur HVE pour miroir dans la valve HVE.
2. À l'aide des lignes guides marquées en relief sur le HVE, faites glisser la tête de miroir double face n° 5 HuFriedyGroup dans le connecteur HVE pour miroir complètement jusqu'à ce que la tête de miroir se verrouille pour faire correspondre l'orientation.

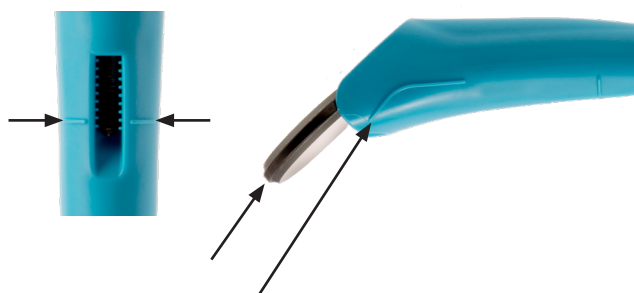

3. Utilisez le connecteur HVE pour miroir sur le patient pendant la procédure.
4. Une fois la procédure terminée, retirez la tête de miroir du connecteur HVE pour miroir.
5. Mettez le connecteur HVE pour miroir au rebut

Remarque : Le connecteur HVE pour miroir comprend des lignes guides marquées en relief sur le HVE pour faciliter l'insertion de la tête de miroir. Deux lignes guides courbées sur les côtés du HVE désignent l'orientation de la tête de miroir et une ligne guide droite sur la tige indique la profondeur appropriée pour l'insertion de la tête de miroir.



HuFriedyGroup #5 Mouth Mirrors

MIR5DSHDB	#5 HD Black Line Double-Sided Mirror
MIR5DSHD	#5 HD Double-Sided Mirror
MIR5DS	#5 Rhodium Double-Sided Mirror

Hu-Friedy

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC
3232 N. Rockwell Street | Chicago, IL 60618 | USA
1-800-Hu-Friedy | info@hu-friedy.com



Fabriqué aux États-Unis
HFL-738 / REV B - 10/2023

Sauf indication contraire, tous les noms de produits sont des marques de Hu-Friedy Mfg. Co., LLC., de ses filiales ou sociétés associées.
©2023 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. Tous droits réservés.

