


# IMS Cassette Barcode Label IMS-CABL

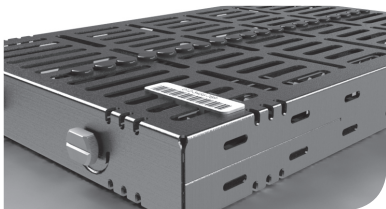

For intended use only by dental professionals. **Inspect, clean and sterilize before each use.** Steam sterilize for at least 4 minutes at 270°F/132°C or 30 minutes at 250°F/121°C. Recommend 30 minute dry time after sterilization cycle. Do not heat above 350°F/177°C. Use recommended chemicals only. Do not disinfect with phenols. Detailed care and maintenance instructions available upon request or go to [Hu-Friedy.com](http://Hu-Friedy.com).

**DE** Dieses Produkt darf nur von Zahnärzten verwendet werden. **Vor jeder Anwendung überprüfen, reinigen und sterilisieren.** Mindestens 4 Minuten bei 270 °F/132 °C oder 30 Minuten bei 250 °F/121 °C dampfsterilisieren. Empfehlung: 30 Minuten Trocknungszeit nach Sterilisationszyklus. Nicht auf über 350 °F/177 °C erhitzen. Nur empfohlene Chemikalien verwenden. Nicht mit Phenolen desinfizieren. Detaillierte Anweisungen zur Pflege und Wartung sind auf Anfrage sowie auf [Hu-Friedy.com](http://Hu-Friedy.com) verfügbar.

**ES** Solo para uso de profesionales dentales. **Revise, limpie y esterilice antes de cada uso.** Esterilice al vapor durante al menos 4 minutos a 270 °F (132 °C) o 30 minutos a 250 °F (121 °C). Se recomienda secar durante 30 minutos después del ciclo de esterilización. No caliente por encima de 350 °F (177 °C). Utilice solo productos químicos recomendados. No desinfecte con fenoles. Las instrucciones de cuidado y mantenimiento detalladas están disponibles previa solicitud o visitando [Hu-Friedy.com](http://Hu-Friedy.com).

**FR** Destiné uniquement à l'usage des professionnels dentaires. **Procédez à une inspection, un nettoyage et une stérilisation avant chaque usage.** Stérilisez à la vapeur pendant au moins 4 minutes à une température de 270 °F (132 °C) ou pendant 30 minutes à une température de 250 °F (121 °C). Laissez sécher 30 minutes après le cycle de stérilisation. Ne pas chauffer à une température supérieure à 350 °F (177 °C). N'utilisez que les produits chimiques recommandés. Ne pas désinfecter avec des phénols. Des instructions d'entretien et de maintenance détaillées sont disponibles sur demande ou en ligne au [Hu-Friedy.com](http://Hu-Friedy.com).

**IT** Per uso esclusivo da parte di professionisti del settore odontoiatrico. **Controllare, pulire e sterilizzare prima dell'uso.** Sterilizzare a vapore per almeno 4 minuti a 270 °F / 132 °C o per 30 minuti a 250 °F / 121 °C. Si consiglia di lasciare asciugare per 30 minuti dopo il ciclo di sterilizzazione. Non sottoporre a temperature al di sopra di 350 °F / 177 °C. Utilizzare solo le sostanze chimiche raccomandate. Non disinfettare con fenoli. Le istruzioni di cura e manutenzione dettagliate sono disponibili su richiesta oppure accedendo al sito [Hu-Friedy](http://Hu-Friedy.com).



1-800-Hu-Friedy  
[Hu-Friedy.com](http://Hu-Friedy.com)

Manufactured for  
Hu-Friedy Mfg. Co., LLC  
3232 N. Rockwell St.  
Chicago, IL 60618 USA

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC  
Zweigniederlassung Deutschland  
Ziegeleiweg 1  
D-78532 Tuttlingen-Möhringen

